

发热伴血小板减少综合征布尼亚病毒 PCR 检测试剂盒

产品介绍：

产品名称：发热伴血小板减少综合征布尼亚病毒 PCR 检测试剂盒

英文名称：Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Bunyavirus (SFTSV) RT-PCR

组成及试剂配制：


1、酶标板：一块（96 孔）

2、标准品（冻干品）： 2 瓶，请临用前 15 分钟内配制。每瓶以样品稀释液稀释至 0.5ml，盖好后室温静置大约 10 分钟，同时反复颠倒/搓动以助溶解，其浓度为 200 U/L，然后做系列倍比稀释（注：不要直接在板中进行倍比稀释），分别配制成 200 U/L，100 U/L，50 U/L，25 U/L，12.5 U/L，6.25 U/L，3.12 U/L，样品稀释液直接作为空白孔 0 U/L。如配制 100 U/L 标准品：取 0.3ml （不要少于 0.3ml ）200 U/L 的上述标准品加入含有 0.3ml 样品稀释液的 Eppendorf 管中，混匀即可，其余浓度以此类推。

3、样品稀释液：1×20ml。

4、检测稀释液 A: $1 \times 10\text{ml}$ 。

5、检测稀释液 B: $1 \times 10\text{ml}$ 。

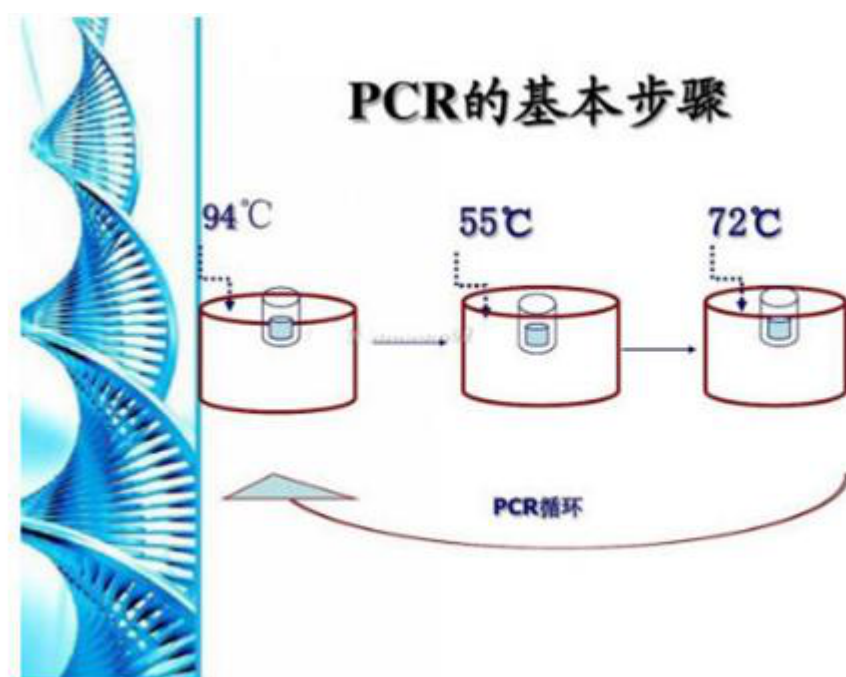

样本采集、存放及运输：

1、样本采集：各类型样本按照常规方法采集；

2、存放：样本在 2°C ~ 8°C 条件下保存应不超过 72h， -70°C 以下可长期保存，但应避免反复冻融（zui 多冻融 3 次）；

3、运输：采用泡沫箱加冰密封进行运输。

特点优势:

1. 特异性: 所有产品使用的引物均经过详尽的生物信息学分析, 经过 GenBank 及自建庞大数据库的比对, 确保所用的每一条引物均为种属或血清型特异的基因序列区段, 可实现对种属及血清型的特异检测, 特异性均达到 100%。
2. 重现性: 该系列所有产品均经过大量实验菌株的验证, 重现性为 100%。
3. 灵敏性: 该系列产品可实现对检测菌的高灵敏检测, 当样品中的浓度达到 103cfu/ml 时, 可实现对其的直接检测, 无需繁琐的增菌过程。
4. 实用性: 检测范围广, 涵盖了对人体危害较为严重的 17 种呼吸道及肠道致病菌, 可实现对临床样品及其他环境取样的快速检测, 整个检测过程为 3-4 个小时。
5. 优势 1: 序列资源丰富, 除 GenBank 公布的序列外, 公司还进行了大量菌株的序列破译, 从理论上保证所选引物具有良好的保守性和特异性。
6. 优势 2: 该系列试剂盒均经过大量的保守性及特异性实验验证, 凭借公司拥有的丰富的菌种资源, 每一种检测试剂盒均经过了 20 余种标准菌株和临床菌株的保守性验证及 40 余种近缘标准菌株和临床菌株的特异性验证, 确保在使用过程中不会出现任何的假阳性及假阴性报告结果。

使用方法:

注：所有试剂使用前需完全解冻，混合均匀，6,000rpm 离心数秒后使用。

1. 样本处理（样本处理区）

待检样本的核酸提取可采用病毒 RNA 提取试剂盒或自动化核酸提取仪等，具体提取方法请参照相关说明书；阳性质控品及阴性质控品无需提取，可直接使用。

2. 扩增试剂准备（PCR 前准备区）

取 N 个（N=阴性质控品+待检样本+阳性质控品）PCR 反应管，每管分别加入 FMD RT-PCR 反应液 19 μ l、RT-PCR 酶 1 μ l（也可根据每头份用量计算 N+1 份 FMD RT-PCR 反应液、RT-PCR 酶所需总量，两者混匀离心后分装 20 μ l 至单个 PCR 反应管）。

组分每头份用量 FMD RT-PCR 反应液 19 μ l RT-PCR 酶。

1. 将所有 PCR 反应管于 6,000rpm 离心 30s，转移至样本处理区。

2. 加样（样本处理区）

3. 在上述的 PCR 反应管中分别加入待检样本 RNA 提取物、阴性质控品和阳性质控品各 5 μ l，盖紧管盖，于 6,000rpm 离心 10s，转移至扩增区。